

ميزان حمام متي ميزور DIGITAL

كتيب التعليمات



عزيزي المستهلك ، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية من قبل استعمال مرتب إلى تجنب التلف الناتج عن الاستخدام غير الصحيح ولفهم وظائف هذا المنتج بشكل أفضل. صلسهولة إيلاء اهتمام خاص للسلامة يرشد. إذا قمت بتمرير الجهاز إلى طرف ثالث ، يجب أيضًا تسليم تعليمات التشغيل هذه. يرجى الاحتفاظ بها للمراجع المستقبلية

إجراءات حماية مهمة

- يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام
- احتفظ بالتعليمات الحالية للمراجع المستقبلية
- استخدم الجهاز فقط للأغراض المنزلية والتطبيقات المنزلية أو التطبيقات المماثلة
- - مثل: - مناطق مطبخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى ؛
من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وبيئات النوع السكني الأخرى ؛ - نوع
البيئة مثل
- منازل المزرعة • مبيت وإفطار •
- استخدم الجهاز فقط بالطريقة الموضحة في هذه التعليمات
- لا تستخدم هذه الوحدة مطلقًا بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو أحواض
الغسيل أو أي أوعية أخرى بها ماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من نتوءات المياه
- لا تستخدم هذا الجهاز ويداك مبتلتان
- أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز بدون إشراف عند استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود فقط. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي
ضرر محتمل ناتج عن الاستخدام غير الصحيح أو التعامل غير السليم
- لا يدرك الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة دائمًا الخطر الذي يشكله استخدام الأجهزة
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر 8 سنوات فما فوق والبالغين ، مع
انخفاض القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة وإذا تم
إعطاؤهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم
المخاطر التي تنطوي عليها
- هذا الجهاز ليس لعبة ، فلا تترك الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الإعاقة ليلعبوا
معهم
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
- ، من أجل ضمان سلامة أطفالك ، يرجى إبقاء جميع العبوات (الأكياس البلاستيكية
الصناديق ، البوليسترين ، إلخ) بعيدًا عن متناولهم
- الحذر ! لا تسمح للأطفال الصغار باللعب بالرقائق المعدنية
- ! هناك خطر الاختناق**
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب
- لا تضعه في غسالة الأطباق أبدًا

- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم الجهاز في الخارج ودائمًا ما تضعه في بيئة جافة
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا ينصح بها المنتج. يمكن أن تشكل خطرًا على المستخدم وخطرًا لتلف الجهاز
- هذا الجهاز غير مخصص للعمل عن طريق جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل
- قد يؤدي التشغيل غير الصحيح والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم
- هذا الجهاز ، المصمم للاستخدام المنزلي ، يتوافق مع المعايير المتعلقة بهذا النوع من المنتجات
- يجب استخدام الجهاز ووضعه على طاولة أو سطح مستو وثابت
- لا يجوز استخدام العنصر ، إذا تم إسقاطه أو إذا كانت هناك علامات مرئية للضرر
- فيما يتعلق بإرشادات التنظيف ، يرجى الرجوع إلى الفقرة أدناه من الدليل
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

معلومات عامة

رمز "الكتاب المفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في السجل



نفايات المعدات (WEEE) والاختصار ، "BIN" تم شطب الرمز الكهربائي والإلكترونية) يعني أنه في نهاية العمر الافتراضي ، لا ينبغي التخلص منها مع النفايات المنزلية ، ولكن يجب حفظها في فرز المنطقة يمكن أن يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا



، هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، طوعياً "CE" رمز يعكس المتطلبات الأساسية في المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها ضمانات الامتثال للمتطلبات الأساسية



، (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) في حماية البيئة ROHS يشهد رمز أنه بالنسبة لكل مادة من المواد الخطرة الخمسة • الرصاص • الزئبق • (سداسي التكافؤ) الكروم • منتجات الحماية من اللهب فإن ذروة التركيز متساوية إلى أو أقل من ، PBDE و PBB من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01% للسادس • الكاديوم 0.1%



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير الرمز كجزء من مجموعة منفصلة (مثل صندوق إعادة التدوير ، والنفايات ، ونقطة الإدخال الطوعية



المزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>


الاحتياطات اللازمة للاستخدام

- لا تستخدم الجهاز في حالة كسر أو تلف الجزء الزجاجي أو أي جزء آخر - الطريق.
- تعامل مع الجهاز و / أو حركه بعناية -
- لا تصب أي سائل على الجهاز -
- لا تطأ الميزان بالأحذية أو الأقدام المبللة أو الجوارب المبللة -
- لا تضع أي أشياء على الميزان يمكن أن تلحق الضرر بالزجاج و / أو الجهاز -

الخصائص المحددة للجهاز

تعرف على جهازك

رموز الشاشة

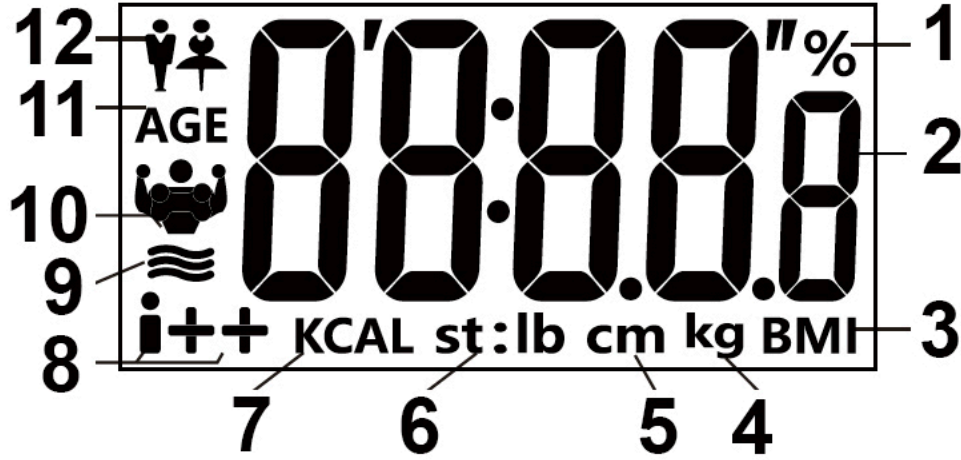

1. شعار معروف لقياسات النسبة المئوية.
2. LCD أرقام.
3. مؤشر كتلة الجسم. مؤشر كتلة الجسم.
4. وحدة الوزن بالكيلو جرام.
5. الوحدة بالسنتيمتر لارتفاع المستخدمين.
6. وحدة الوزن بالجنيه.
7. وحدة بالكيلو كالوري للتعبير عن التمثيل الغذائي الأساسي.
8. رموز النسبة المئوية للدهون. ط- سليم ؛ ط - - لحمي ؛ أنا للعادي ؛ أنا + لزيادة الوزن أنا + + للسمنة.
9. رمز النسبة المئوية للماء.
10. رمز النسبة المئوية للدهون والعضلات والعظام.
11. الرمز المستخدم لسن المستخدم.
12. الرمز المستخدم للجنس ذكر أو أنثى المستخدم.

تفاصيل الرمز

••• Fat%

☪ Bone%

☪ Muscle%

i-- Thin

i- Slim

i Normal


i+ Heavy

i++ Overweight

التنفيذ

يمكن أن يتجاوز إجمالي جميع النسب المئوية للشخص نفسه 100% بسبب احتواء العضلات والعظام على الماء والدهون.
وزن العضلات أو العظام المعبر عنه بنسبة% يأخذ جميع العناصر المختلفة بما في ذلك جزء من نسبة الماء والزيادة المعبر عنها بالفعل.

لإعادة ظهور القياسات الأخيرة التي تم إجراؤها

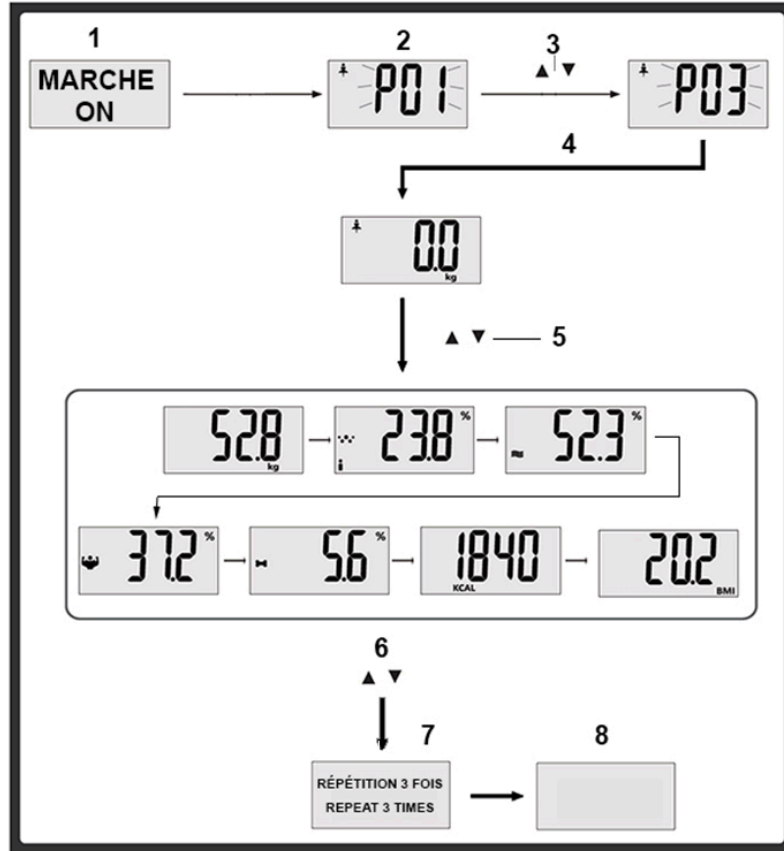

1. على الميزان "On / Setting" اضغط على مفتاح.
2. يعرض المقياس الإعدادات الافتراضية ص 01.
3. اضغط على "Δ / ∇" لاختيار رقم الذاكرة المطلوب (03).
4. انتظر 6 ثوان أو اضغط برفق على سطح مقياس الجسم. يعرض المقياس 0.0 كجم.
5. RECALL MODE: اضغط على "Δ / ∇" لاختيار الوضع.
6. اضغط على "Δ / ∇" ربما لتسريع العرض.
7. ستظهر مؤشرات الوزن ودهون الجسم والماء والعضلات والعظام ومؤشر كتلة الجسم على الشاشة 1 × 1 و 3 مرات.
8. بعد العرض المتتالي لثلاث مرات ، سيتوقف الميزان تلقائياً.

التنظيف والصيانة

مشاكل خاصة

1. على الشاشة. ابتعد عن الميزان "Err" إذا تجاوز الوزن السعة القصوى البالغة 150 كجم ، فسيتم عرض 1. على الفور وإلا فقد يتلف.
2. فأنت بحاجة إلى استبدال البطاريات ، "Lo" إذا تم عرض 2.
3. %فهذا يعني أن المقياس غير قادر على إعطاء مؤشر كتلة الجسم (إما أنه أقل من 5 ، "Err2" إذا تم عرض 3. (%أو أكبر من 50
4. هذا الجهاز عبارة عن أداة إلكترونية وقد يتأثر بأجهزة الإرسال اللاسلكي المستخدمة في مكان قريب (مثل 4. (الهواتف المحمولة وأجهزة الراديو وأجهزة الاتصال اللاسلكي وأفران الميكروويف
5. إذا لم يتم عرض الشاشة بشكل صحيح أو قدمت معلومات غير صحيحة ، فحرك الجهاز بعيدًا عن أي مصدر 5. تداخل أو قم بإيقاف تشغيل المصدر المعني أثناء استخدام المقياس

جدول التقييم

الحالة الفيزيائية حسب محتوى الدهون والماء

% de graisse						
Age	Genre	Maigre	Mince	Normal	Surpoids	Obésité
		i--	i-	i	i+	i++
≤30	Homme	≤11%	11.1% ~ 15.5%	15.6% ~ 20.0%	20.1% ~ 24.5%	> 24.5%
	Femme	≤16%	16.1% ~ 20.5%	20.6% ~ 25.0%	25.1% ~ 30.5%	> 30.5%
> 30	Homme	≤15%	15.1% ~ 19.5%	19.6% ~ 24.0%	24.1% ~ 28.5%	> 28.5%
	Femme	≤20%	20.1% ~ 25.0%	25.1% ~ 30.0%	30.1% ~ 35.5%	> 35.0%

Age		% d'Eau		
		Low	Normal	High
Homme	< 40	< 50%	50~65%	> 65%
	40~60	< 48.5%	48.5~63.5%	> 63.5%
	> 60	< 47%	47~62%	> 62%
Femme	< 40	< 45%	45~60%	> 60%
	40~60	< 43.5%	43.5~58.5%	> 58.5%
	> 60	< 42%	42~57%	> 57%

BMI مؤشر كتلة الجسم	< 18.5	معتدل البنية
	18.5~25	عادي
	25.0~30	زيادة الوزن
	30	سمين

تغيير البطاريات

أو لم يعد الميزان يعمل ، فقد تحتاج إلى تغيير البطاريات "10" عندما تعرض الشاشة.
قم بإزالة غطاء حجرة البطارية الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.
استبدل البطاريتين بأخرى مماثلة جديدة (غير مرفقة) مع مراعاة اتجاه القطبية المشار إليه.
أغلق الغطاء.

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا بدءًا من تاريخ شراء المستهلك.
المستندات في إثبات الضمان هي:
الفاتورة و •

- لوحة الضمان المملوءة والمختومة (الموجودة على جانب أو أسفل صندوق الهدايا). بدون إثبات هذه المستندات ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني ، خلال فترة الضمان ، نتعامل مجانًا مع عيوب الجهاز أو الملحقات الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال. الخدمات في إطار الضمان لا تنطوي على أي تمديد لفترة الضمان ولا تعطي الحق في ضمان جديد ، في حالة اللجوء إلى الضمان ، قم بإعادة الجهاز الكامل إلى بائع التجزئة الخاص بك ، في عبوته الأصلية مصحوبة بأدلة إثبات الشراء.
- لا يوجد ما يبرر كسر الأجزاء من الزجاج أو البلاستيك في جميع الحالات. لا يتم ضمان العيوب الموجودة في الملحقات أو الأجزاء المستهلكة (على سبيل المثال: الفحم في المحركات ، والخطافات ، وأحزمة القيادة ، والتحكم عن بعد في الاستبدال ، وفرش الأسنان البديلة ، والشبكات ، إلخ) وكذلك التنظيف أو الصيانة أو استبدال الأجزاء المتآكلة و وبالتالي لدفع
- في حالة التدخل الأجنبي ، يصبح الضمان لاغياً وباطلاً
- بعد سريان فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح

مواصفات

كجم / 330 رطل 150 :	سعة
كجم / 0,2 رطل 0,1 :	تخرج
كجم / 150 كجم - 12 رطل / 330 رطل 6 :	معدل الوزن
(غير متوفرة) AAA بطاريات 1,5V LR03 ou 2 × 2 :	مزود الطاقة
غرام 1540 :	وزن

صنع في جمهورية الصين الشعبية

وتم التحكم فيه وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية ، مثل: التوافق ، EC استوفى هذا الجهاز توجيهات تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة (LVD) والضغط المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي السلامة ومواصفات الفنية.

حماية البيئة (تدمير البطاريات)

لإزالة البطارية:

- افتح حجرة البطارية واسترجع البطارية .
- يجب إزالة البطارية قبل إعطاء الوحدة لإعادة الشحن -
- تحتوي البطارية على كاديوم النيكل و / أو الليثيوم و / أو هيدريد معدن النيكل، يجب التخلص من البطارية - بطريقة آمنة
- لا ترميها في سلة المهملات ، بل ضعها في مركز النفايات

Sotech International مستورد من شركة
رقم أ "LE PERIPOLE" 107
33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
فرنسا - 94120 Fontenay sous-bois