

Thermomètre infra-rouge frontal

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.

- Cet appareil n'est pas un jouet, Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages, ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

MISES EN GARDES SPECIFIQUES A CET APPAREIL

- Toujours demander, à un professionnel de santé, l'explication des mesures de températures corporelles données par ce produit.
- La température corporelle mesurée n'est valide que pour les humains et aucun cas pour les animaux.
- Ne pas utiliser pour des personnes qui souffrent des oreilles (type otites ou autres pathologies liées aux oreilles). Cela pourrait affecter ces zones à risques.
- Ne pas utiliser le thermomètre après avoir pris un bain, nagé ou avec les oreilles et/ou le front humides. Ceci peut entraîner des problèmes de fiabilité de la mesure.
- Tenir éloigné les téléphones portables et les appareils générant un champ électromagnétique du thermomètre frontal.
- Ne jamais démonter l'appareil ou tenter de le réparer soi-même.
- Ne pas tordre, plier le produit ou tirer fortement sur une partie de l'appareil.
- Ne pas taper fortement ou faire tomber le thermomètre.
- Les résultats de mesure de température corporelle de ce thermomètre constituent seulement une indication. Ils ne peuvent, en aucun cas, remplacer le diagnostic médical d'un médecin.
- En cas de questions sur les résultats de mesure obtenus, suivre rigoureusement les instructions du médecin.
- Il est parfois difficile, pour les patients, de juger et d'extrapoler soi même les résultats de ses propres mesures ou de celle de ses proches, suivre scrupuleusement les instructions du médecin.
- L'auto-diagnostic peut conduire à une aggravation de la santé.

- Ne pas toucher ou souffler sur le capteur infra-rouge du thermomètre.
- Si le capteur infra-rouge est endommagé ou sale, il peut engendrer des résultats de mesures erronés.

Notes : S'il y a une différence importante de température entre l'endroit de stockage du thermomètre et l'endroit de son utilisation, laisser l'appareil s'adapter à la température ambiante de la pièce durant 30 minutes avant de commencer la mesure.

Ne pas se positionner à proximité d'un système ou d'un appareil d'air conditionné.

Avant d'utiliser le thermomètre, vérifier que le capteur infra-rouge n'est pas embué ou poussiéreux. Si c'est le cas, utiliser un chiffon doux imbibé d'alcool dilué à 70% et le nettoyer avec précaution.

VARIATION DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE

La température de l'être humain est relativement stable. Toutefois, elle varie selon les circonstances particulières rencontrées, notamment aux différents moments de la journée.

La nuit

La température est, en général, plus basse en raison d'une plus faible activité.

Le matin

La température corporelle est, en général, plus haute, le différentiel de température entre la chaleur du lit et la chambre plus fraîche peut entraîner une contraction passagère des muscles, ce qui génère une légère augmentation de la température corporelle.

A midi

Après le déjeuner, le corps humain produit une température plus importante que la moyenne, le corps la régulant ensuite naturellement. En milieu d'après-midi.


L'après-midi

La température corporelle est, en général, plus basse, cela est lié à une activité physique et une baisse du sucre dans le sang.

Le soir

La température corporelle est, en général, également plus basse en raison d'une activité moins intense et de l'éventuelle baisse de la température ambiante.

CONNAITRE SON THERMOMÈTRE

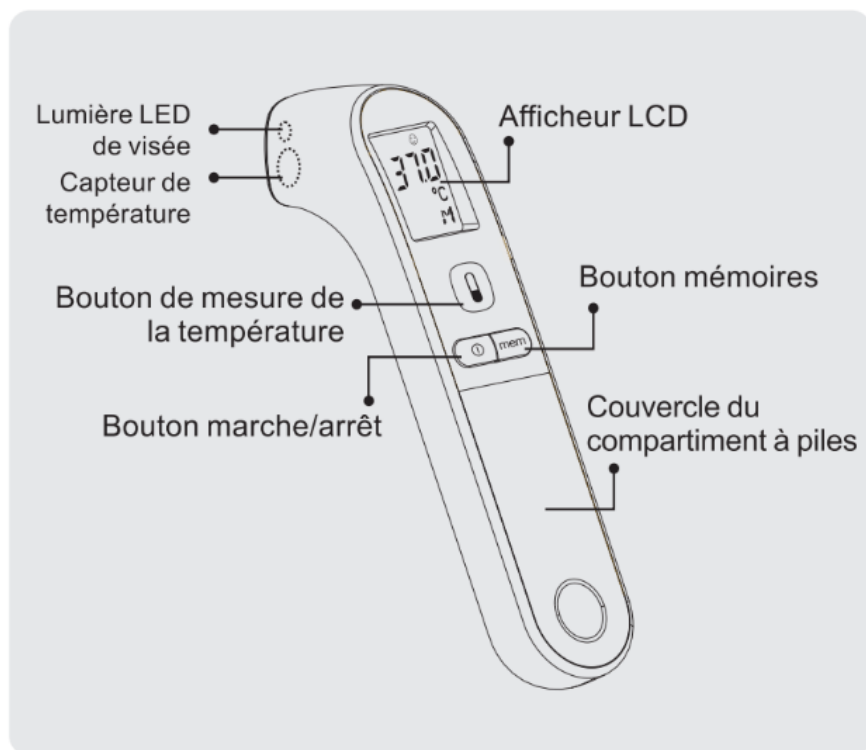

1. Activation ou désactivation de la fonction sonore

Après avoir allumé l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt, appuyer sur le bouton mémoire afin d'activer ou désactiver le mode sonore.

Lorsque l'icône "  " sera affichée, la fonction sonore sera activée. Pour passer au mode silence, appuyer une nouvelle fois sur le bouton mémoire et l'icône "  " sera affiché. Le mode silencieux sera activé. Pour repasser à la fonction sonore, appuyer une nouvelle fois sur la touche mémoire.

2. Passer de l'unité de mesure Celsius °C à Fahrenheit °F

Lorsque l'appareil est éteint, appuyer sur la touche mémoire durant 6 secondes, l'unité de mesure sélectionnée s'affiche alors sur l'écran LCD.

Pour passer de l'une à l'autre, appuyer à nouveau sur la touche mémoire.

Note : Pour valider l'unité de mesure, attendre 8 secondes que l'appareil s'éteigne automatiquement ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

3. Fonction mémoire

Lorsque l'appareil est éteint, appuyer brièvement sur la touche mémoire. Le thermomètre peut afficher la sauvegarde des 9 mesures précédentes.

Précisions

Thermomètre frontal sans contact est de type infra-rouge.

Note : Lors de la prise de température, le thermomètre doit être positionner de 3 à 5 cm du front.

Ecran rétro éclairé avec 3 couleurs selon le niveau de température : vert, orange, rouge.

Informations sur la signification des couleurs de l'écran LCD.

Lorsque la température corporelle mesurée est inférieure à 34°C, l'inscription « LO » avec un écran rouge est affichée.

Lorsque la température est comprise entre 34°C et 37,2°C, l'écran s'affiche en couleur verte ce qui signifie une température normale.

Lorsque la température corporelle est comprise entre 37,2°C et 38,2°C, cela signifie que la température est supérieure à la normale et l'écran s'affiche en couleur orange.

Lorsque la température corporelle est supérieure à 38,2°C, cela signifie une fièvre relativement forte et l'écran s'affiche en couleur rouge.

Si la température corporelle mesurée est supérieure à 43,0°C, l'écran s'affiche en rouge et l'inscription « Hl » apparaît sur l'écran. Cela signifie une fièvre très forte => contacter un médecin ou le service des urgences.

Mémoire

L'appareil garde en mémoire 9 mesures.

Mesure en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Réglage d'usine en degrés Celsius.


Mesure en 3 à 5 secondes.

Aucun embout nécessaire.


Signal sonore pouvant être désactivé.

Arrêt automatique après 30 secondes.

ECRAN LCD

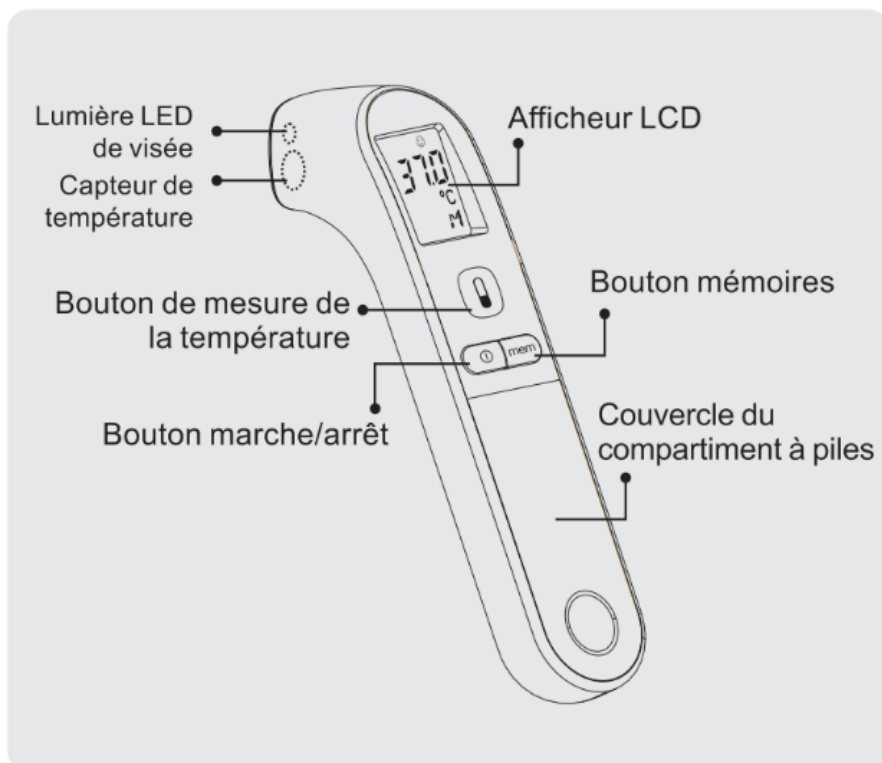


Description des informations de l'afficheur LCD :

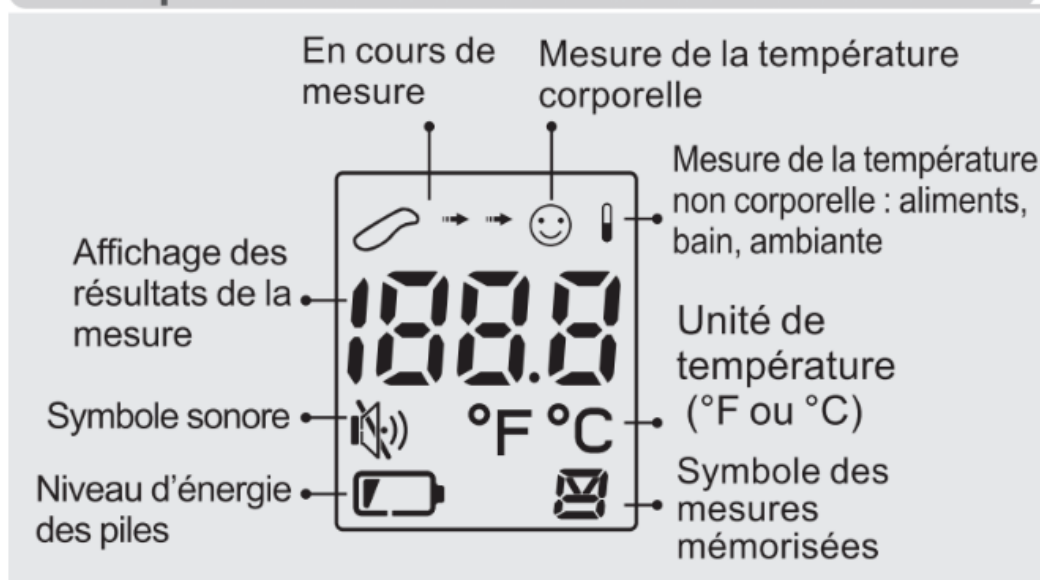

INSTALLATION DES PILES (NON FOURNIES)

1. Appuyer sur la partie basse incurvée du couvercle à piles.
Note : celui-ci s'ouvrira automatiquement.
2. Insérer deux piles LR3 ou AAA de type alcaline. (non fournies)
Notes : S'assurer de bien respecter les polarités indiquées au fond du compartiment à piles.

compartiment à piles.

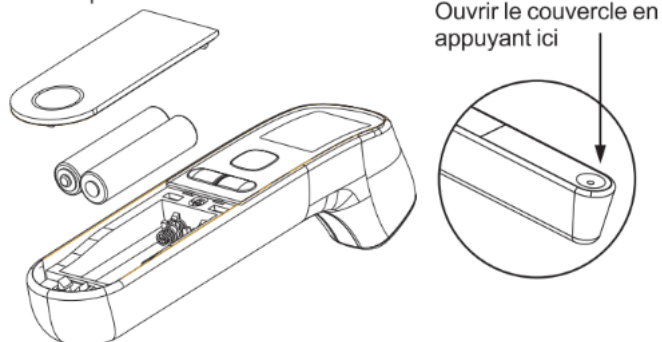

Lorsque les piles sont usagées, le signe " LO " est affiché sur l'écran LCD, et l'icône batterie apparait de façon permanente. Ceci signifie qu'il faut changer les piles.

UTILISATION

Ce thermomètre frontal infrarouge est dédié à la mesure de la température corporelle humaine en la prenant sur le front et peut mesurer la température ambiante ou celle d'un bain ...

Température corporelle

Appuyez sur la touche « Marche / Arrêt » pour allumer le thermomètre.

Note : La mesure précédente s'affiche sur l'écran LCD, puis trois petits traits apparaissent.

Positionner le thermomètre à une distance de 3 à 5 centimètres du centre du front.

Note : la lampe de visée vers le milieu et juste au-dessus des sourcils.

Appuyer sur la touche « Température » pour commencer la mesure.

Note : soit brièvement, soit de façon continue.

Lorsque la lampe de visée s'éteint (après 3 à 5 secondes), vous pouvez lire le résultat de la mesure.

Note : Si la fonction sonore est activée, il faut attendre que le bip sonore retentisse avant d'enlever le thermomètre de sa position de mesure frontale.

Tant que le bip n'a pas retentit, la phase de mesure n'est pas terminée.

Température d'aliments, bains, d'ambiance

Appuyer durant 6 secondes sur le bouton « Marche / Arrêt » afin de passer en mode « non corporel » pour mesurer les températures d'aliments, de liquides, de bains, d'ambiance de la pièce.

Appuyer ensuite sur le bouton « Température »

Note : Au bout d'une seconde, vous pouvez voir la mesure de la température sur l'afficheur.

NETTOYAGE & MAINTENANCE

Nettoyer le corps du thermomètre et le capteur à l' aide d'un tampon de coton ou linge imbibé d'alcool (isopropyl à 70 %).

Veiller à ce que le liquide ne pénètre pas à l'intérieur du thermomètre.

Ne jamais nettoyer l'appareil avec des agents de nettoyage abrasifs, des diluants ou du benzène

Ne pas l'immerger dans l'eau ou d'autres liquides ou solutions de nettoyage.

Après le nettoyage, patienter 10 minutes avant d'effectuer une mesure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionne avec 2 piles 1.5V du type LR3 ou AAA (non fournies)

Fabriqu  en RPC

Les caract ristiques peuvent changer sans avis pr alable

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a  t  contr l  d'apr s toutes les directives europ ennes, actuelles, applicables.

Cet appareil a  t  con u et fabriqu  en respect des derni res r glementations et prescriptions techniques, en mati re de s curit .

PRECISIONS

Ecran   cristaux liquides, 4 chiffres et ic nes sp ciales

A l'allumage du produit, un bip court pour indiquer que le produit est pr t pour la mesure.

A la fin de la mesure, un long bip.

En cas de probl mes ou d'erreurs, trois bips courts.

En cas d'alertes d'une fi vre, jusqu'  10 bips en fonction du niveau de fi vre.

9 mesures stock es

Arr t automatique du produit apr s 30 secondes

Manufacturer par :
Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.
Tel:86-755-33825988
Fax: 86-755-33825989

Main Site: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Road, Xikeng Village,
Henggang Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong China
Additional site1: 2-4 Floor ,No.5 Shanzhuang Rd., Xikeng Village, Henggang
Town, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



Authorised representative: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague,
Netherlands.
Tel: +31645171879 (English), +31626669008 (Dutch)